

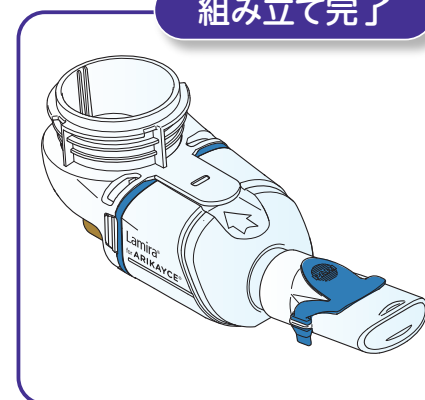
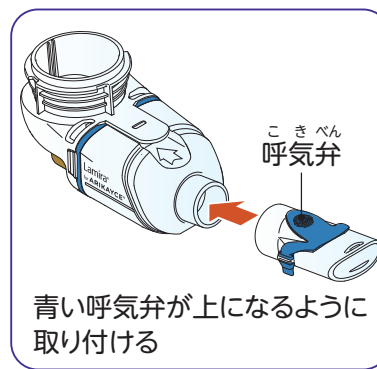
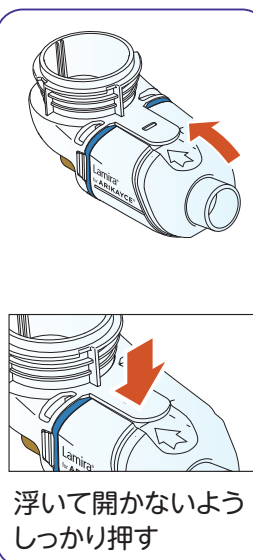
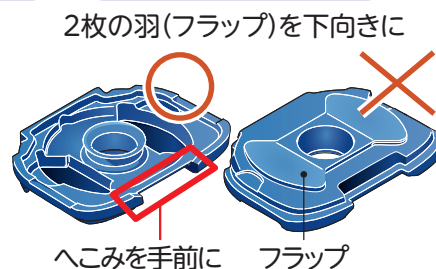
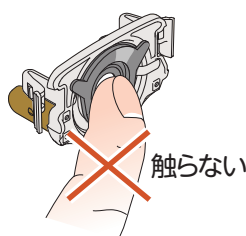




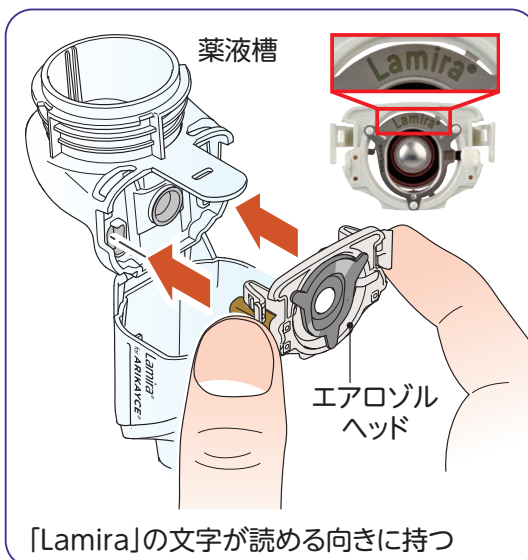


- ☐ 手を洗いましたか？
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか？

ハンドセットを組み立てる





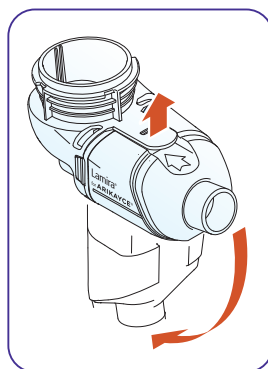


接続コードをハンドセットとラミラ吸入器に取り付ける

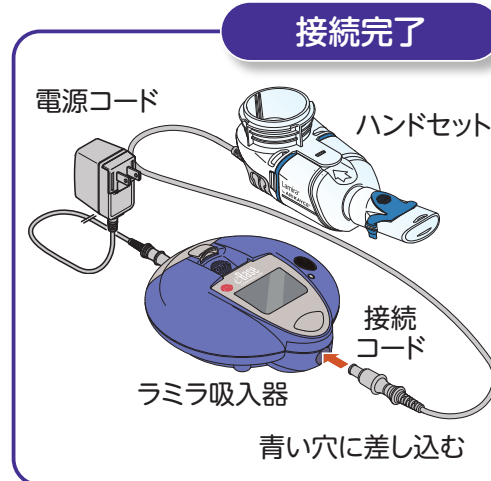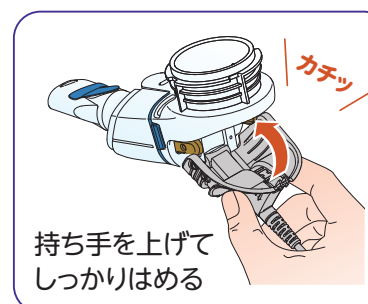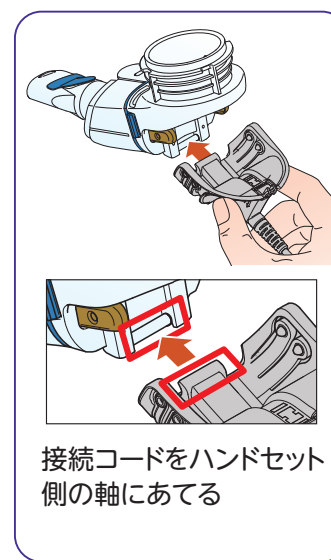


- ☐ お薬は室温に戻っていますか？ **吸入する45分以上前に冷蔵庫から出しておく**
- ☐ まわりにヒーター、ストーブ、可燃性のガスなどはありませんか？

薬の瓶を開けて、薬液を入れる

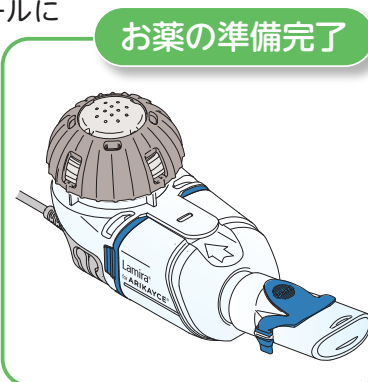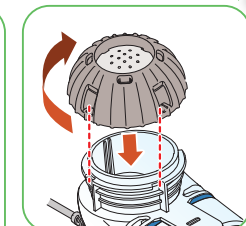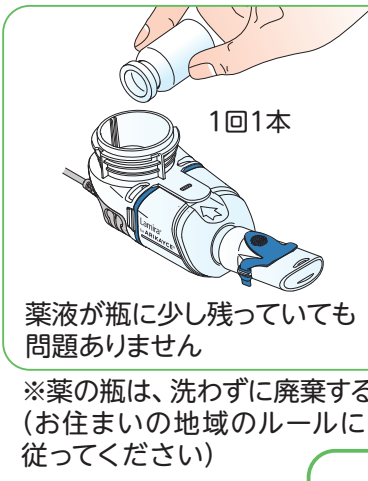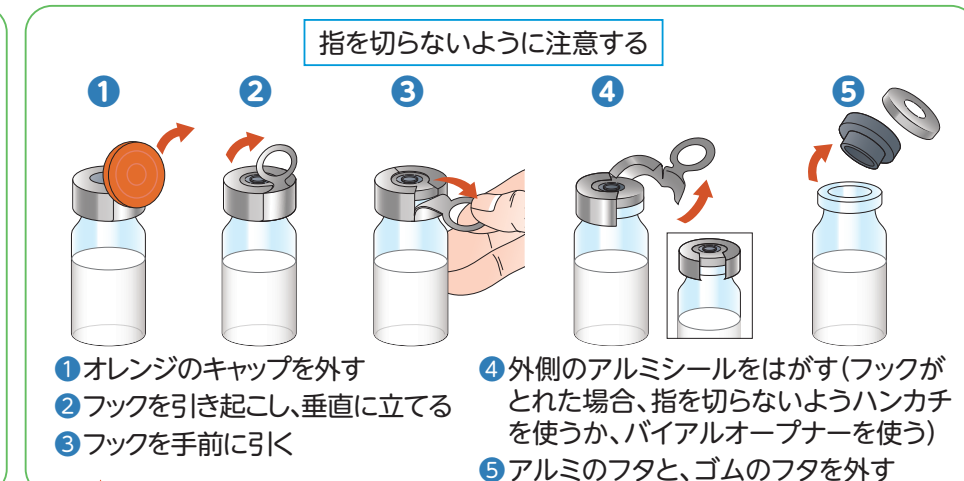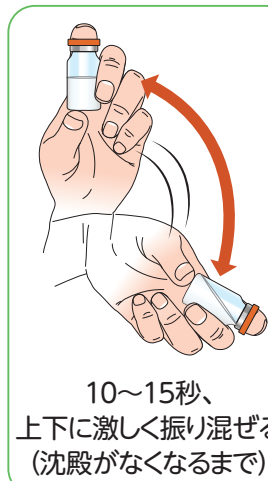


吸入する

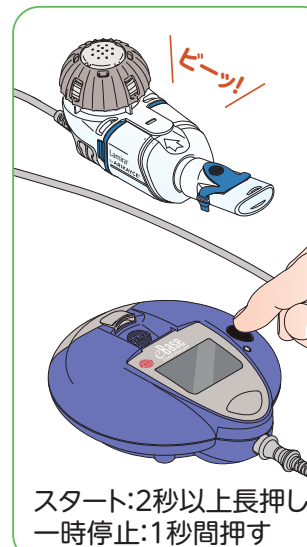

- 吸入のポイント
- ① マウスピースをくわえて、一度、ゆっくりと口から深呼吸する
 - ② その後、通常の口呼吸を続ける
 - ③ 吸入後は、ぬるま湯でうがいをする

※吸入時間は平均約14分間ですが、使用環境により前後することが多くあります(20分以内でしたら問題ありません)

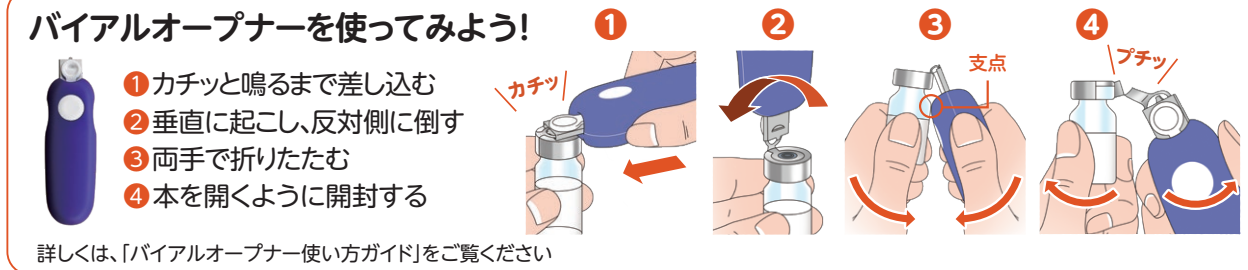








- ☐ お薬が薬液槽のなかに残っていませんか？
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか？

ハンドセットを分解する


*粉末状、クリーム状、白濁している洗剤は使わないでください

部品についているお薬を拭き取り、洗浄する (下段へ続く)

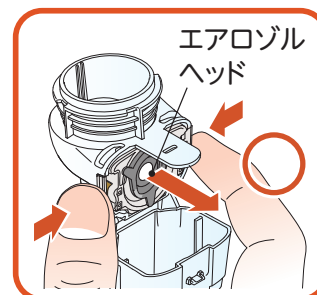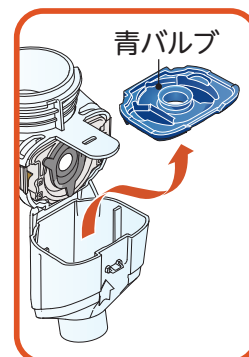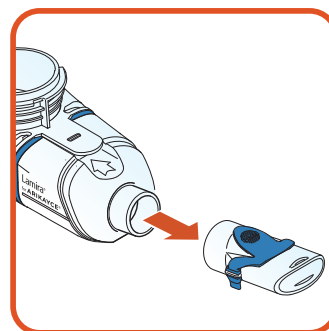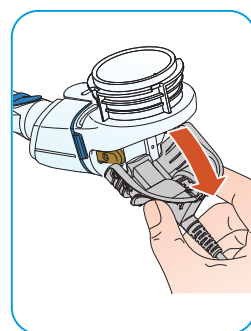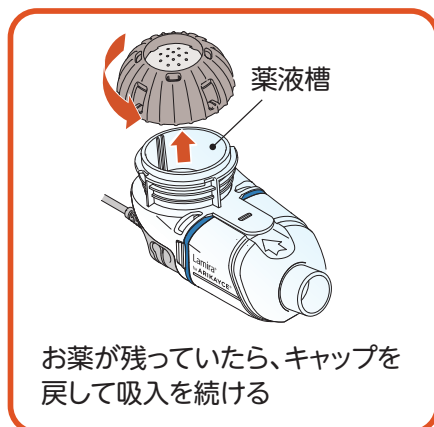


分解完了



ハンドセットの部品は全部で5つです

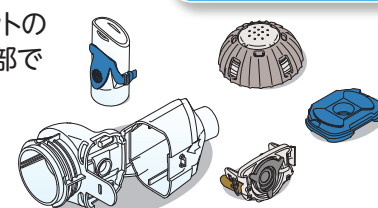

エアロゾルチャンバ内に液体がたまっていても問題ありません

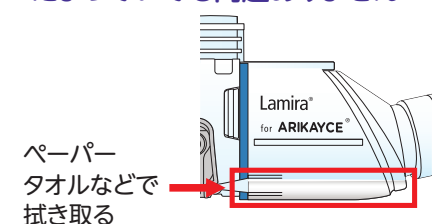


エアロゾルヘッド以外の4つの部品は、ペーパータオルなどで付着しているお薬を拭き取る

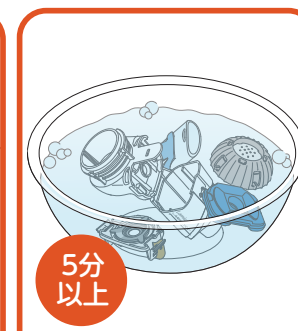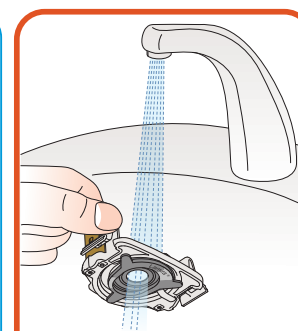

消毒する


乾燥して保管

終了

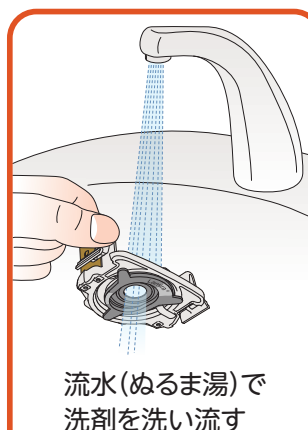

週に1回行う

エアロゾルヘッドは、1週間に1回、超音波クリーナーで洗浄する

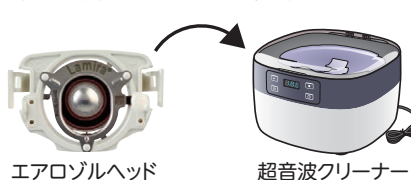


- 水道水を入れ、3分以上を目安に洗浄する
- 洗浄が終わったら、ぬるま湯でエアロゾルヘッドをすすぐ


どちらかを毎回行う

蒸気式消毒器 (約11分)

煮沸消毒 (5分以上)

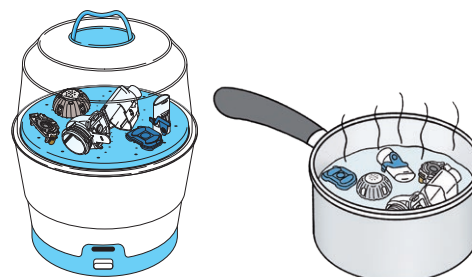

- 蒸気式消毒器は、水道水(80mL)を使用する
- 煮沸消毒には、蒸留水あるいは、精製水(日本薬局方と記載のあるもの)を使用する

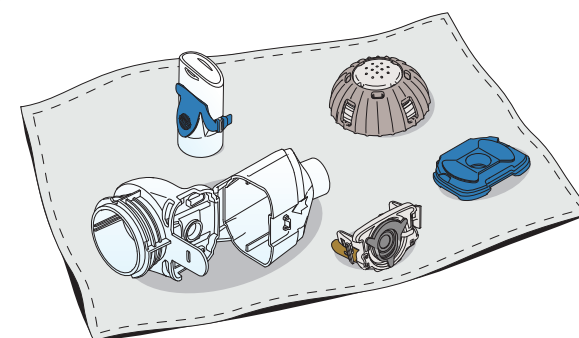

- ハンドセットは、高温多湿を避け、ほこりのない場所に保管する
- ラミラ吸入器、電源コード、接続コードは付属のケースに収納する

ハンドセットは毎月交換します
医療機関でお受け取りください

新しいハンドセットは、使用する前に
オレンジ枠の順に分解、洗浄、消毒、乾燥
を行います

※使用済みのハンドセットは廃棄する
(お住まいの地域のルールに従ってください)

ご不明な点は、アリケイア サポートにお電話ください

0120-384-600

【朝8時～夜10時 365日】

アリケイア サポートをご利用いただく場合、以下のリンク先の「アリケイア サポート個人情報保護方針」にご同意いただいたものとみなされます。
<https://aricare.net/kojinjouhou/>

アリケイア®の販売名はアリケイア®吸入液590mgです
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです

Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイア® are registered trademarks of Insmed Incorporated.
Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

インスメッド合同会社
東京都千代田区永田町二丁目10番3号
東急キャピタルタワー13階
<https://insmed.jp>
【問い合わせ先】
メディカルインフォメーションセンター
電話：0120-118808